



MIKASA X-RAY Co.,Ltd.

TRB 9020H

在宅・検診・救急・災害医療など多様化するニーズに応える。



Portable X-ray System by MIKASA

日本製

バッテリー式
携帯型 X 線
撮影装置



□特長

☆軽量

バッテリー内蔵時の製品重量はわずか 7.3kg。

☆1回の充電で約 500 回の連続撮影が可能

電源はカートリッジ式専用バッテリー。

外部電源がない環境でも撮影が可能。

* 撮影回数は撮影条件などにより異なります。

☆充電機能

充電途中でも撮影可能な並列充電方式

☆小焦点 X 線管球


公称焦点値(0.8)の小焦点のための鮮明な画像が撮れます。

☆コリメーターとレーザーポインター

照射ランプは明るい LED を採用。

レーザーポインターの十字設計で

撮影距離と中心点を示します。

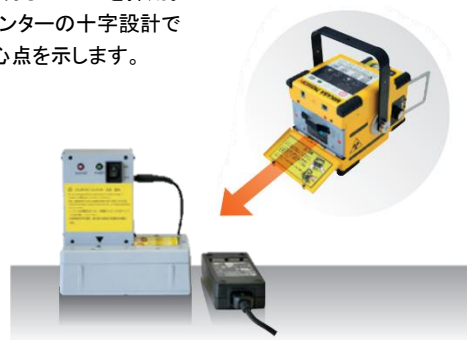


+K(アンド・ケイ)(オプション)

可搬性を重視した「折り畳み式スタンド」

車への積み下ろし・移動が楽々行えます。

セッティング・撮影が楽々出来ます。

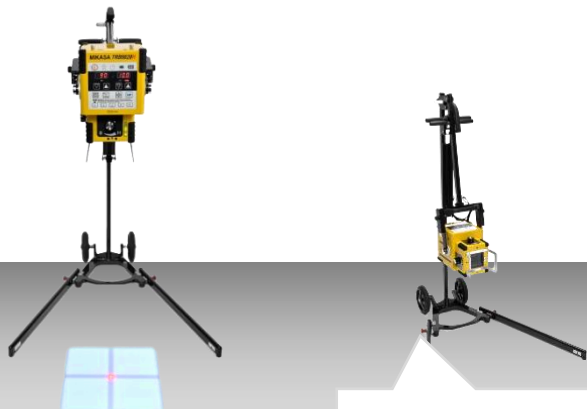

寸法：W779×H1,729×D813 (mm)
重量：10.7 kg (X線撮影装置を除く)
製造販売届出番号：11B2X00011000061

キャリングケース(オプション)

(TRB9020H 専用)

キャリングケースを用意することで装置の持ち運びが楽に行えます。



寸法：W466×D306×H340(mm)

□仕様

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 製品名 | ポータブル X-ray ミカサ TRB9020H | 管電圧 | 40kV-90kV 2kV step |
| 出力・電源 | 90kV 15mA 1,350w DC57.6V | 管電流 | 20mA(40-60kV) 15mA(62-80kV) |
| 公称焦点値 | 0.8 | | 10mA(82-90kV) ハイパワーモード:15mA(82-90kV) |
| タイマー | 0.01-1.00sec ハイパワーモード:0.01-0.32sec | 寸法・重量 | L340×W220×H192(mm) 7.3kg |

認証番号:224ABBZX004000

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

□製品に関するお問い合わせ

製造販売元:ミカサエクスレイ株式会社
〒232-0023 神奈川県横浜市南区 2-7-2
TEL / 045-308-9711 FAX / 045-308-9713
URL:<http://www.mikasax-ray.com>

○お求めは信用のある当店で

